

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CÓDIGO: POP.NVEH.001	CONDUTA PARA COLETA DE SWAB NASOFARINGE DE PACIENTES INTERNADOS	
EMIÇÃO: 22/11/2023		
VERSÃO: 01	ELABORAÇÃO: HILDA MARQUES ALMEIDA DE FRANCA	REVISÃO: 01

1. Objetivo

Padronizar a coleta e encaminhamento de amostra de SWAB para diagnóstico de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), COVID-19 e Influenza H1N1, em todos os pacientes admitidos na unidade.

2. Abrangência

Unidades de internação do Hospital Brites de Albuquerque.

3. Responsável

Preferencialmente as Enfermeiras diaristas (visto que coleta deverá acontecer nos dias úteis) em caso de ausência das diaristas, enfermeiros plantonistas devem realizar a coleta.

4. Materiais necessários

- Kit de coleta (meio de transporte para vírus respiratório(tubo));
- 1 SWAB nasofaríngeo;
- EPI's (capote, máscara(N95/ PFF2), óculos, touca e luva de procedimento);
- Caixa térmica identificada;
- Baterias de gelo;
- Suporte para tubos;
- Etiquetas identificadas com os nomes dos pacientes.

5. Descrição do procedimento

1º PASSO: Identificar o meio de transporte para vírus respiratório (tubo) com a etiqueta constando: **nome, data de nascimento, data da coleta e nº do GAL** (fornecido pelo NVEH).

Na etiqueta consta uma numeração (ordem numérica) colocada manualmente, a qual deve ser colocado na **tampa do tubo**.

Organizar os tubos na estante em ordem numérica.

Manter a estantes com os tubos em caixa térmica, com temperatura de 2° a 8°C, identificada com "Risco Biológico – LAGEN".

Atenção!

Finais de semana e feriados as amostras coletadas a nível excepcional

Atualizado por: Hilda Marques Almeida de França Enfermeira Analista NVEH Hilda Marques A. França Data: 23/11/2023 Enfermeira COREN-PE 628476	Validado por: Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira Setor Qualidade Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira COREN-PE 629289	Aprovado por: Eud Johnson Cordeiro Diretor Geral Data: 30/11/2023 EUD JOHNSON GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430 HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	Página 1 de 4
---	---	--	----------------------

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CÓDIGO: POP.NVEH.001	CONDUTA PARA COLETA DE SWAB NASOFARINGE DE PACIENTES INTERNADOS	
EMIÇÃO: 22/11/2023		
VERSÃO: 01	ELABORAÇÃO: HILDA MARQUES ALMEIDA DE FRANCA	REVISÃO: 01

(óbitos e altas não coletadas no período da assistência em vida) devem ser acondicionadas na geladeira do setor, de forma isolada (envolvida em luva de procedimento limpa). Coleta após falecimento, deverá ser realizada até 6 horas do óbito.

2º PASSO:

- Higienizar as mãos;
- Usar os EPI's (capote, máscara, óculos, touca e luva de procedimento);
- Identificar o paciente conforme a etiqueta do meio de transporte (tubo).

3º PASSO:

- Explicar ao paciente se consciente o procedimento a ser realizado.
- No caso de paciente inconsciente ou criança explicar ao acompanhante.

4º PASSO:

- Retirar o envólucro que envolve o SWAB;
- Manter se possível o paciente em decúbito dorsal, sem travesseiros ou coxim na altura da coluna cervical;
- Se necessário solicitar ajuda ao técnico de enfermagem ou acompanhante.

5º PASSO:

- Coletar secreção da cavidade nasofaringe, com o SWAB.
- Realizar movimentos circulares e delicados nas paredes laterais da cavidade
- Colocar o SWAB submerso no meio de transporte (tubo),
- Após coleta quebrar o excesso da haste do SWAB, desta maneira facilitará a vedação do tubo, **nunca dobrá-la**.

6º PASSO:

- Armazenar o tubo em estante (suporte para tubo) dentro da caixa térmica, em ordem numérica crescente;
- Após coleta sinalizar para o NVEH.

Atualizado por: Hilda Marques Almeida de França Enfermeira Analista NVEH Data: 23/11/2023 Enfermeira COREN-PE 628476	Validado por: Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira Setor Qualidade Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira COREN-PE 629789	Aprovado por: Eud Johnson Cordeiro da Silva Diretor Geral Data: 30/11/2023 GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430 HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	Página 2 de 4
---	---	---	----------------------

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CÓDIGO: POP.NVEH.001	CONDUTA PARA COLETA DE SWAB NASOFARINGE DE PACIENTES INTERNADOS	
EMIÇÃO: 22/11/2023		
VERSÃO: 01	ELABORAÇÃO: HILDA MARQUES ALMEIDA DE FRANCA	REVISÃO: 01

7º PASSO:

- Caso alguma coleta não seja realizada, a enfermeira responsável pela coleta deve informar ao NVEH;
- Entregar a caixa térmica com as amostras ao condutor quando solicitado pelo mesmo.

6. Segurança e cuidados especiais

- Higienizar as mãos;
- Fazer uso correto dos EPI's (capote, máscara, óculos, touca e luva de procedimento).

7. Ações em caso de não conformidade

- Caso o meio de transporte(tubo) estiver vazio ou em quantidade insuficiente para submergir o SWAB, o mesmo deverá ser descartado.
- Se por ventura o profissional responsável pela coleta realizar o procedimento sem luvas, o mesmo deverá realizar a higienização das mãos imediatamente.
- No decorrer ou após a coleta ocorrer sangramento nasal, o profissional responsável pela coleta deverá comunicar ao Núcleo de Segurança do Paciente e ao médico plantonista.
- Se por caso não ocorrer o envio das amostras em horário do LACEN, as mesmas deverão ser mantidas na estante e colocadas na geladeira de forma isolada, com isso evitar a contaminação da geladeira e posteriormente encaminhadas ao LACEN, no primeiro dia útil subsequente. E comunicar ao NVEH.

8. Referências

SAÚDE, Ministério da. Orientações para manejo de pacientes com COVID-19. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/manejo-clinico-e-tratamento>. Acesso em: 22 maio 2020.

UFMG. Instruções para coleta de amostras para diagnóstico molecular – Covid-19. Disponível em: <https://www.nupad.medicina.ufmg.br/doencas-infecciosas/instrucoes-coleta-covid-19/>. Acesso em: 22 maio 2022

Atualizado por: Hilda Marques Almeida de França Enfermeira Analista NVEH Hilda Marques A. França Enfermeira Data: 23/11/2023 COREN-PE 629476	Validado por: Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira Setor Qualidade Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira COREN-PE 629780	Aprovado por: Eud Johnson Cordeiro de Sousa Diretor Geral Data: 30/11/2023 EUD JOHNSON GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430 HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	Página 3 de 4
--	--	--	---------------


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CÓDIGO: POP.NVEH.001	CONDUTA PARA COLETA DE SWAB NASOFARINGE DE PACIENTES INTERNADOS	
EMIÇÃO: 22/11/2023		
VERSÃO: 01	ELABORAÇÃO: HILDA MARQUES ALMEIDA DE FRANCA	REVISÃO: 01


9. Histórico de revisão

Nº Revisão	Data	Natureza da Revisão	Elaboração	Aprovação
01	23/11/2023	Emissão Inicial	Hilda Marques Almeida de França Enfermeira Analista NVEH	Eud Johnson Diretor Geral

10. Anexos

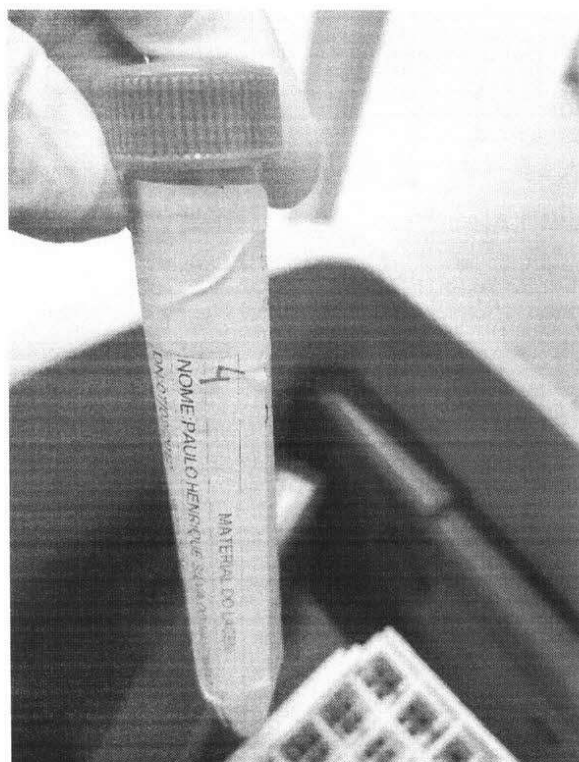

Tubo com etiqueta com N° do GAL e outras informações do paciente e número que corresponde à ordem numérica dos tubos.

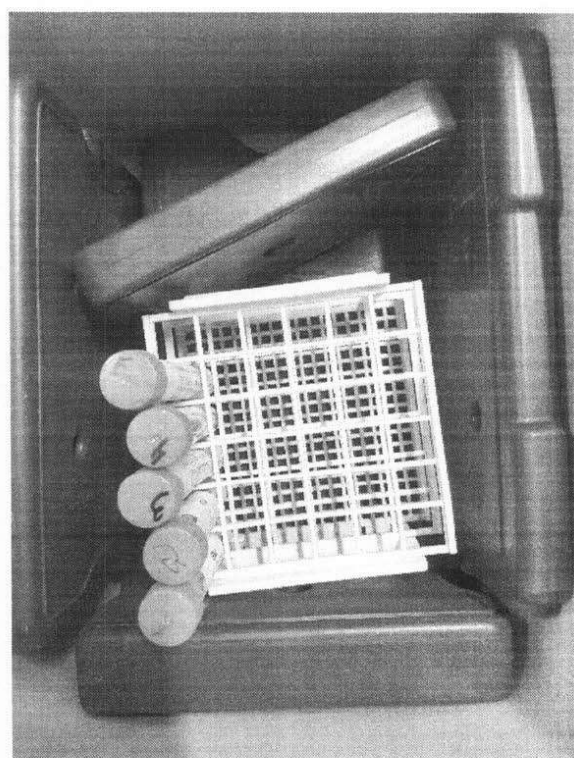

Tubo acomodados na posição vertical com números correspondentes à etiqueta na tampa.

Atualizado por: Hilda Marques Almeida de França Enfermeira Analista NVEH Hilda Marques A. França Enfermeira Data: 23/11/2023 COREN-PE 628476	Validado por: Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira Setor Qualidade Maria Eduarda M. Ferreira Enfermeira COREN-PE 529289	Aprovado por: Eud Johnson Cordeiro de Lima Diretor Geral Data: 30/11/2023
---	---	--


 EUD JOHNSON
 GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430
 HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE